

製品仕様

製品番号	製品名	先端径 / テーパー	長さ	入数	価格(円)
BSTW1GG321015	ウェーブ・ワンゴールド グライダー	#15 .06	21 mm	3本	6,430
BSTW1GG325015			25 mm		
BSTW1GG331015			31 mm		
A0753221G0S03	ウェーブ・ワンゴールド スモール	#20 .07	21 mm	3本	6,430
A0753225G0S03			25 mm		
A0753231G0S03			31 mm		
A0753221G0P03	ウェーブ・ワンゴールド プライマリー	#25 .07	21 mm	3本	6,430
A0753225G0P03			25 mm		
A0753231G0P03			31 mm		
A0753221G0M03	ウェーブ・ワンゴールド ミディアム	#35 .06	21 mm	3本	6,430
A0753225G0M03			25 mm		
A0753231G0M03			31 mm		
A0753221G0L03	ウェーブ・ワンゴールド ラージ	#45 .05	21 mm	3本	6,430
A0753225G0L03			25 mm		
A0753231G0L03			31 mm		
BSTW1GS325AST	ウェーブ・ワンゴールド グライダーシークエンス ● READYTEEL K ファイル #10 ● ウェーブ・ワンゴールド グライダー ● ウェーブ・ワンゴールド プライマリー		25 mm	3本 (各1本)	4,500
A0754221G9A03	ウェーブ・ワンゴールド アソート ● ウェーブ・ワンゴールド スモール ● ウェーブ・ワンゴールド プライマリー ● ウェーブ・ワンゴールド ミディアム ● ウェーブ・ワンゴールド ラージ		21 mm	4本 (各1本)	8,600
A0754225G9A03			25 mm		8,600
A0754231G9A03			31 mm		8,600

関連製品

製品名	内容
X-スマートIQ	・モーターハンドピース ・コントラアングル ・ハンドピーススタンド ・ACアダプター 他
AH プラス	チューブセット ジェットセットスターター
ガッタコア ピンク	6本入 (#20 ~ #90) 30本入 (#20 ~ #40)
ウェーブ・ワンゴールド ガッターパーチャ	60本入 (スモール、プライマリー、ミディアム、ラージ)

製品名: ウェーブ・ワンゴールド 一般的名称: 電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号: 227AGBZX00033000 クラス分類: II (管理)  
 製品名: X-スマートIQ 一般的名称: 歯科用根管拡大装置 医療機器認証番号: 229AGBZX00094000 クラス分類: II (管理・特管)  
 製品名: AH プラス 一般的名称: 歯科用根管充填シーラ 医療機器認証番号: 220AABZX000327000 クラス分類: II (管理)  
 製品名: ガッタコア ピンク 一般的名称: 歯科用根管充填固状材料 医療機器認証番号: 227AGBZX00042000 クラス分類: II (管理)  
 製品名: ウェーブ・ワンゴールド ガッターパーチャ 一般的名称: 歯科用根管充填固状材料 医療機器認証番号: 229AGBZX00015000 クラス分類: II (管理)

\*表示価格は、2018年10月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 \*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布借成ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

http://www.dentsply-sankin.com



WE KNOW ENDO.

WaveOne® Gold  
ウェーブワン ゴールド

Surf the canal with confidence




# 製品特長

## 1 柔軟性の向上

- GOLDワイヤーにより、優れた柔軟性を実現


デンツプライシロナ独自の熱処理工程により誕生した優れた柔軟性と疲労破折抵抗性を有するNiTiです。

**GOLDワイヤー**

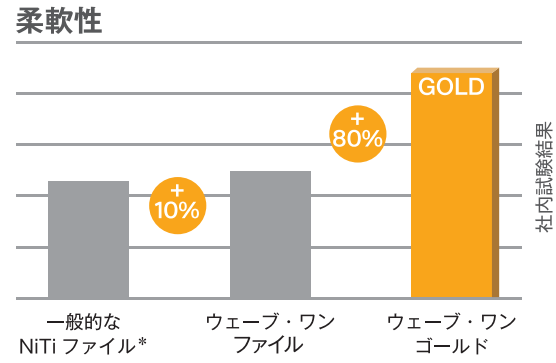


## 2 患者さんの安全性に配慮

- ウェーブ・ワン ファイル (当社従来品) に比べ、疲労破折抵抗性が50%向上し、ファイルの破折リスクが減少
- プロテーパー\* (当社従来品) に比べ、歯質への食い込みを軽減

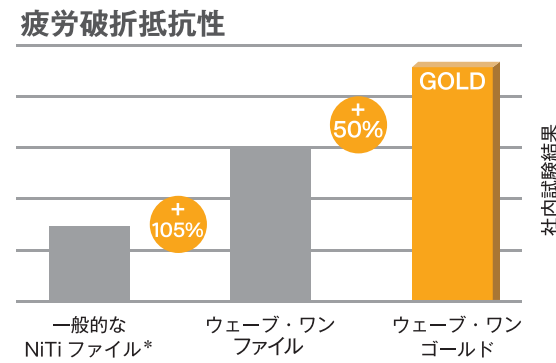


## 3 治療の効率化

- 切削効率が向上
- 約80%の症例に1本で対応でき、根管拡大・形成時間が短縮

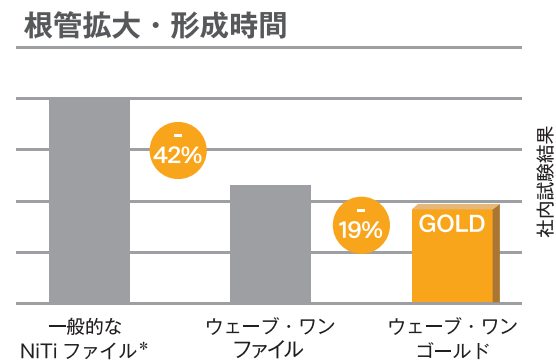


## ファイルデザイン

Dr. C.Ruddle、Dr. J.Webber、Dr. W.Pertot、Dr. S.Kuttler が開発チームに参加

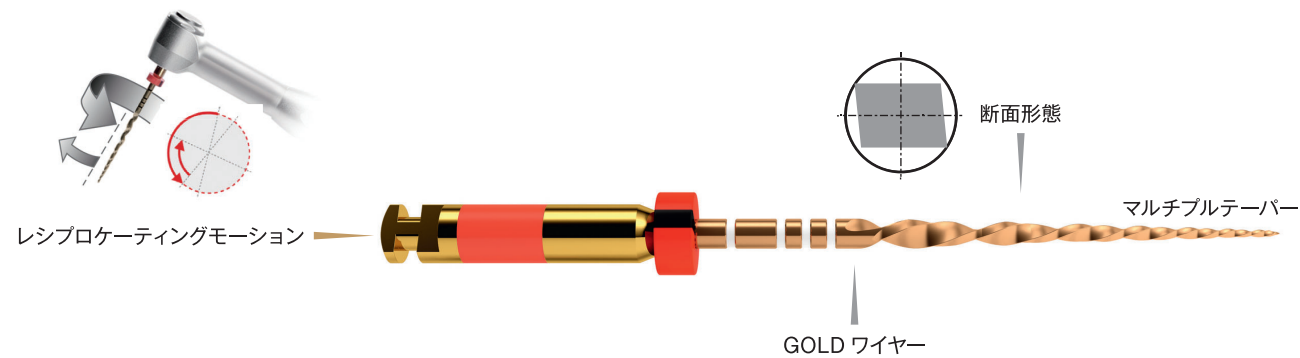

- 根管壁に1つもしくは2つのカッティング・ポイントが接触
- 接触する位置が変わることで、ファイルの食い込みを軽減

## 使用手順

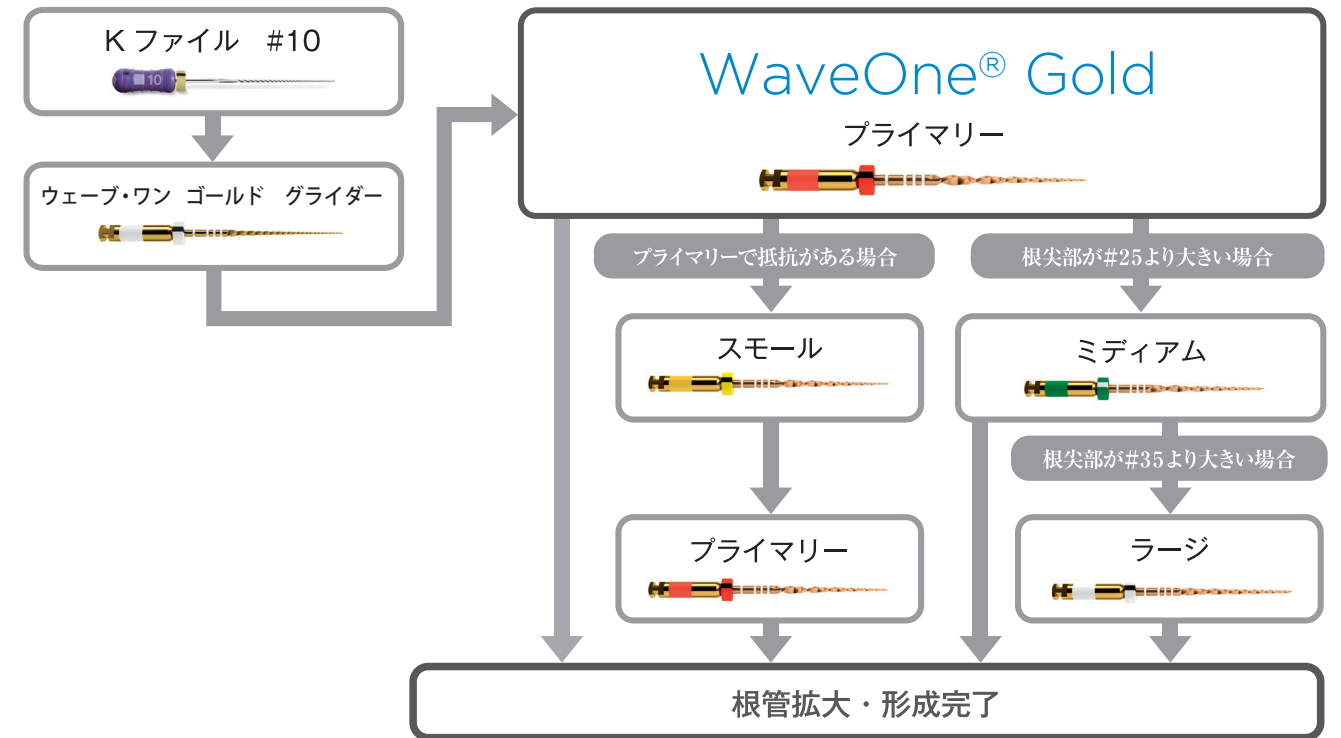

### すぐに使用できるシングルユースファイル

- シンプル：滅菌済みパッケージのため開封後すぐに使用可能
- 交差感染のリスク低減：1F-1P (ワンファイル・ワンパーシェント)
- 切削効率の向上



上顎左側第一大臼歯

種類	先端径 / テーパー	長さ (mm)	シャンク長さ (mm)
スモール	#20 .07	21/25/31	11
プライマリー	#25 .07	21/25/31	11
ミディアム	#35 .06	21/25/31	11
ラージ	#45 .05	21/25/31	11

## 根管治療の流れ



※ iPad mini は商品に含まれません。